



BU ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE
KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN


COMPEX ®

MOLECULE™

Titreşimli Masaj Topu

GİRİŞ

Compex Molecule titreşimli masaj topu, sert veya ağrılı kasların rahatlatılmasına yardımcı olmak üzere dört adet titreşim seviyesine sahiptir. Hedef alanlarda dolaşımı artırır, ağrıyı ve kaslardaki iltihabı dindirir. Vücudunuzu rahatlatmak ve iyileşmeyi ilerletmek için bu aleti egzersizden önce ve sonra kullanın.

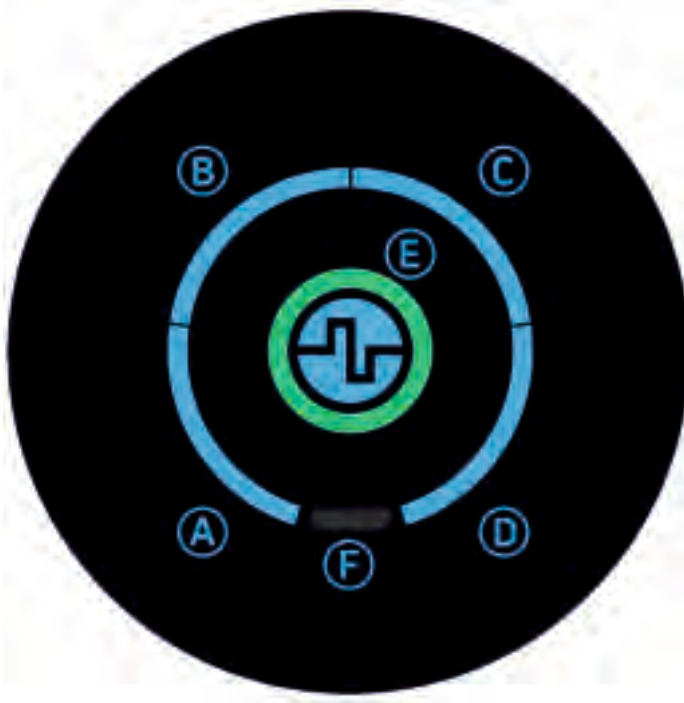

(A) Seviye 1 – 1700 rpm

(B) Seviye 2 – 1900 rpm


(C) Seviye 3 – 2200 rpm

(D) Seviye 4 – 2200 - 1700 rpm

(E) Güç Göstergesi

(F) USB şarj bağlantı noktası (5V 2A)

GÜÇ GÖSTERGESİ

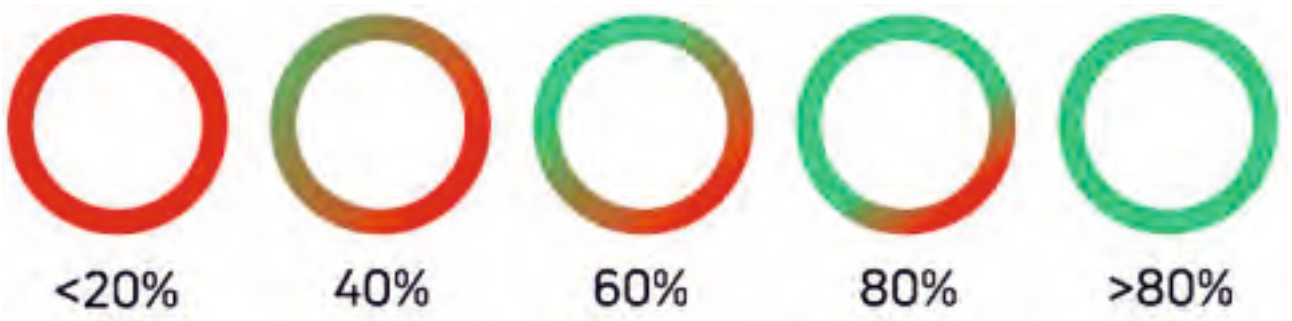

TEMEL ÖZELLİKLER		HIZ 1	HIZ 2	HIZ 3	HIZ 4	AÇIKLAMA
Gürültü (dB)		<54db	-	-	54db	Durum: 30cm’lik mesafe
Rotasyonel Hız (yükte iken)		1700	1900	2200	1700 - 2200	
Hertz (Hz)		28,33Hz	31,67Hz	36,67Hz	28,3Hz - 36,6 Hz	
Güç tüketim testi	Voltaj (V)	8,1	8,06	7,88	7,88	
	Akım (A)	0,29	0,41	0,91	0,8	
	Güç (W)	2,35W	3,3W	7,2W	6,3W	
Şarj ve Deşarj testi	Şarj süresi	1,5 SAAT				
	Deşarj süresi	1 – 1,5 SAAT				Ürün, her 15 dakikalık çalışmada bir tur otomatik olarak durur.
Bekleme durumunda Güç Tüketimi		<60ua				
Adaptör	AC100~240V 50/60HZ, 5V 2A. ABD standardı USB kablosu (Sertifikasyon: uL/ETL ROHS)					
Batarya / PİL	7,4V 1200mAh Lityum Polimer PİL (seri halinde 2 adet)					

ÜRÜN ÇALIřTIRMA TALİMATLARI

Ürün, dört adet titreřim yoğunluęu seviyesine sahip olacak řekilde tasarlanmıřtır. Ürünü açmak / kapatmak için, güç göstergesi ışığı yanana / kapanana kadar güç düęmesine 3 saniye boyunca basın. İstenilen titreřim seviyesini seçmek için, bir seviyeden dięerine geçiř yapmak üzere güç düęmesine basın. Mavi ışık, o anda bulunduęunuz titreřim seviyesini göstermektedir.



DİKKAT

- Uzun süreli ürün kullanımlarında, pilinin %20'den daha az kalmıř řekilde kullanılması tavsiye edilmemektedir. Cihaz pil ömrü %25'in altında olduęunda, pilin boşalmasını önlemek için lütfen cihazı tamamen řarj edin.
- Cihaz her modda, her 15 dakikalık kullanımın ardından otomatik olarak kapanacaktır.



GÜVENLİK UYARISI

BU ÜRÜNÜN, AřAęIDAKİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK KULLANILMASI ZORUNLUDUR:

- Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılır ve/veya uygulanır.
- Herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissederseniz derhal durun.
- Bař ve/veya dięer kemikli alanlarla temastan kaçının.
- Belirli bir konuma yönelik 1 dakikadan fazla olmamak üzere vücut bölgelerinde kullanın. Kaslar üzerinde hareket yapın ve kemikli bölgelerden kaçının.
- Molecule™ ürününü düşürmeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kiři tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlanmadıkça (çocuklar dahil) düşük fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıřtır.
- Cihazla oynamalarını saęlamak üzere çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Cihaz yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynaęı ünitesi <model ICP15A-050-2000B> ile kullanılmalıdır.
- UYARI: Pili yeniden řarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen çıkarılabilir besleme ünitesini kullanın.

KONTRENDİKASYONLAR

AŞAĞIDAKİ KOŞULLARIN GEÇERLİ OLMASI HALİNDE LÜTFEN DOKTORUNUZDAN ONAY ALMADAN MOLECULE™ ÜRÜNÜNÜ KULLANMAYIN:

- Yakın zamanda geçirilen her türlü ameliyat
- Titreşimli masajlardan etkilenen cilt durumları ve/veya yaralar
- Fıtıklaşmış diskler (bel)
- Gebelik
- Diyabet / nöropati veya retina hasarı
- Kalp pili kullanılması
- Titreşimli masajlardan etkilenen yaralanmalar
- Epilepsi veya migren
- Disk herniasyonu (fıtıklaşması)
- Spondilolistez
- Vertebral çıkma veya omurga eklem sertliği
- Yakın zamanda eklemlerin veya IUD'nin değiştirilmesi
- Metal pimler veya metal protezler
- Sağlıkla ilgili herhangi bir hastalık



UYARILAR

- Rahatlatılacak vücut bölgesi yaralı durumdaysa, ürünü kullanmayın.
- Motor mahfazası havalandırmasına kum ve/veya serbest kırıntılar girebileceği için ürünü suya batırmayın / daldırmayın.
- Vidaları çıkarmayın veya sökmeye çalışmayın.
- Bu cihaz, değiştirilemeyen piller içermektedir.

OLUMSUZ / TERS REAKSİYONLAR

Molecule™ ürünü tek bir vücut noktasında 60 saniyeden fazla veya kemikli bölgelerde kullanılırsa, ciltte tahriř ve hafif morarma yaşayabilirsiniz. Ameliyattan, cilt rahatsızlıklarından, yaralardan, sinir rahatsızlıklarından, kırık kemiklerden ve/veya kontüzyonlardan iyileřen kişilerde advers / olumsuz reaksiyonlar yaşanabilir. Bu reaksiyonlardan kaçınmak isteyen kullanıcılar, Molecule™ ürününü kullanmadan önce doktora başvurmalıdır.

řARJ TALİMATLARI

1. Lütfen ilk kullanımdan önce cihazı tamamen řarj edin.
2. Cihaz řarj olurken, güç göstergesi, gerçek pil gücü seviyesine göre yeřil renge dönecektir.
3. Ürün řarj sırasında kullanılamaz.
4. Lütfen cihazla birlikte verilen adaptörü kullanın. Pilin zarar görmesini ve potansiyel tehlikeleri önlemek için farklı adaptörleri kullanmayın.
5. řarj süresi: 1,5 saat.

GARANTİ

Bu cihaz, teslim tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı garantiye sahiptir. Garanti yalnızca cihaz için geçerli olup cihaz pili garanti kapsamında değildir.

Garanti süresi boyunca arızalı ürünler ücretsiz olarak onarılacak veya değıştirilecektir. Yanlış kullanım, kötüye kullanım, değışiklik veya harici olarak neden olunan hasara ilişkin herhangi bir kanıt bulunması bu garantiyi geçersiz kılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen distribütör / imalatçı ile iletişime geçin.

UYGUNLUK BEYANI

FCC PART 15B Uygunluk Beyanı

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uygunluktur. Cihazın çalıştırılması řu iki kořula baėlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz (olmamalı) ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

COMPEX TİTREŐİMLİ MASAJ TOPU

MODEL: INTL-CX202WL03

Lityum polimer pil ile çalışmaktadır (7,4V, 1200mAh, 8,88Wh)

Nominal Giriř: 5V 2A

Anma Gücü: Maksimum 12 W

Yalnızca <ICP15A-050-2000B> besleme ünitesiyle kullanın.



Çin Malı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

DJO France S.A.S. tarafından dağıtılmaktadır
Centre Européen de Fret, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre Fransa
www.compex.com

Telif Hakkı © 2020; DJO, LLC firmasına aittir.

Her hastaya özgü sonuçlar değişiklik gösterebilir. Ne DJO, LLC firması ve ne de yan kuruluşları tıbbi tavsiye vermemektedir. Bu belgenin içeriği tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bunun yerine, eğer varsa, sizin için uygun olabilecek tedavi süreçleri hakkında bilgi için sağlık uzmanınıza danışın.



info@elsa.web.tr
www.elsa.web.tr
@elsa.tr

ANKARA - MERKEZ

Mustafa Kemal Mah. 2156. Sok.
No: 16/7 Çankaya 06510 ANKARA
Tel: 0 312 434 27 94
0 312 434 42 94
Fax: 0 312 434 22 82

ANKARA - ŞUBE

Süleyman Sırrı Sokak No:21/B
Sıhhiye 06420 ANKARA
Tel: 0 312 432 02 45
0 312 432 12 43
Fax: 0 312 432 42 87

İSTANBUL - ŞUBE

Perpa Ticaret Merkezi A-Blok
Kat:1-2-3 No:31
Şişli 34384 İSTANBUL
Tel: 0 212 320 88 81 (4 HAT)
Fax: 0 212 320 88 85

Teknik sorularınız için: teknikdestek@elsa.web.tr | 0(312)434 2794 / 0533 367 7154